




Allergènes: Les bandelettes contiennent les allergènes suivants:

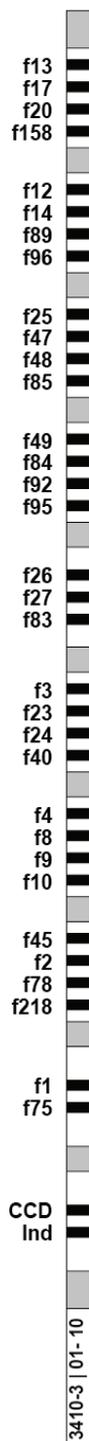

| Position | Code de l'allergène | Nom de l'allergène |
|----------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | f13 | Arachide |
| 2 | f17 | Noisette |
| 3 | f20 | Amande |
| 4 | f158 | Noix de cajou |
| 5 | f12 | Pois |
| 6 | f14 | Soja |
| 7 | f89 | Moutarde |
| 8 | f96 | Avocat |
| 9 | f25 | Tomate |
| 10 | f47 | Ail |
| 11 | f48 | Oignon |
| 12 | f85 | Céleri |
| 13 | f49 | Pomme |
| 14 | f84 | Kiwi |
| 15 | f92 | Banane |
| 16 | f95 | Pêche |
| 17 | f26 | Porc |
| 18 | f27 | Bœuf |
| 19 | f83 | Poulet |
| 20 | f3 | Morue |
| 21 | f23 | Crabe |
| 22 | f24 | Crevettes |
| 23 | f40 | Thon |
| 24 | f4 | Farine de blé |
| 25 | f8 | Farine de maïs |
| 26 | f9 | Riz |
| 27 | f10 | Sésame |
| 28 | f45 | Levure de boulanger |
| 29 | f2 | Lait de vache |
| 30 | f78 | nBos d8 - Caséine (lait de vache) |
| 31 | f218 | Lait de chèvre |
| 32 | f1 | Blanc d'œuf |
| 33 | f75 | Jaune d'œuf |
| 34 | CCD | Marqueur CCD |
| A | Ind | Bande d'indication |

Caractéristiques du test

Gamme de mesure: Le test EUROLINE est une méthode semi-quantitative. La gamme de mesure est exprimée selon le système EAST en classes de 0 à 6.

Réactions croisées: A cause de la structure similaire des allergènes, par exemple des similarités dans les substances chimiques ou les espèces botaniques, des réactions croisées peuvent avoir lieu. Les anticorps IgE spécifiques qui se développent chez un patient peuvent également se fixer sur des épitopes identiques de protéines allergènes homologues.